

Your Partner in Medication

**yuyama**



# 1人薬剤師店舗にも シンプルなGS1照合で安心を。

**手軽に導入  
すぐに使える**

薬品マスタ情報が  
プリインストールされているので、  
レセコンとの連動設定さえすれば、  
設置後すぐにでも  
お使いいただけます。

**ハンズフリーで  
かんたん照合**

ハンディターミナルを  
スタンドに固定した置き型タイプのため、  
スキャナを手取る必要がなく、  
両手を使って鑑査業務を  
スムーズに行えます。

医薬品取り違えによる医療事故防止のため「GS1  
データバーによる薬品照合」と「ハンディターミナル  
カメラによる画像記録」、この2つの機能に絞った  
照合システム「GS1チェッカーリミテッド」。

**Check!**

GS1 照合システム

**GS1 CHECKER**

LIMITED



# GS1チェッカーLIMITED 5つの特徴




## POINT ① 設置してすぐに使える

薬品マスタ情報がプリインストールされており、複雑な連携もないため、レセプトコンピュータとの連動設定を行えば設置後すぐにでもお使いいただけます。GS1 データバーの登録がない薬品があった場合でもハンディターミナル上で薬にマスタメンテナンスが行えます。薬品マスタはマザーマスタ配信サービスにより定期的な更新が可能です。

## POINT ④ 薬品照合で調剤過誤防止

GS1データバーで薬品照合するので薬品の取り違いを防ぐことができます。

check!

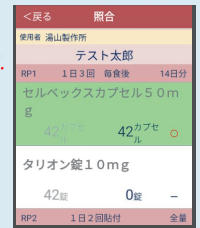


## POINT ② ハンズフリーでかんたん照合



ハンディターミナルがスタンドに固定されているため、両手を自由に使うことができ、鑑査業務をスムーズに行えます。

## POINT ⑤ エビデンスを残して安心

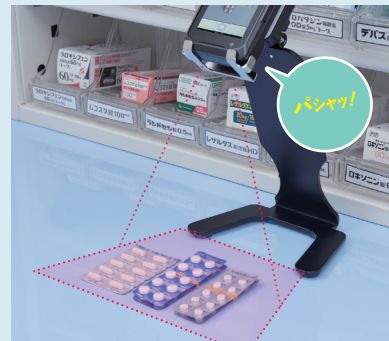


作業台の上に置いた薬品の画像を撮影。処方に紐づけて取り揃え薬品の画像記録を残せるので、後から不安になった場合でも確認でき、患者様からの問い合わせにもスムーズに対応できます。

## POINT ③ コンパクトで設置後もすっきり

PC 端末なし、作業台の上はハンディターミナルとスタンドだけなので、場所を取らず、鑑査台や投薬窓口などどこにでも置けます。

※別途、アクセスポイントとネットワークハードディスクの設置が必要です。  
※設置状況により高さは変動します。

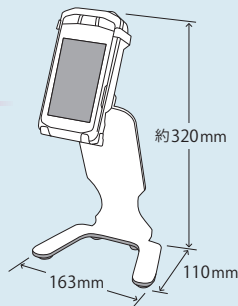

## 角度を変えて撮影範囲を自由に調整できます。

専用スタンドは角度調整を行えるので、A4サイズのトレイが収まるくらいにまで撮影範囲を広げられます。



製品名	GS1 照合システム GS1チェッカー LIMITED
型式	YS-GS1-L
機器構成	■ハンディターミナル DX-A400 (充電ケーブル、USB 電源アダプター込)+専用スタンド ※最大3台まで設置可能 ■アクセスポイント ■ネットワークハードディスク
外形寸法	ハンディターミナル DX-A400 + 専用スタンド W163 × D110 × H 約320mm
質量	ハンディターミナル DX-A400 + 専用スタンド 約1.3kg
オプション	ジャーナルプリンター、LANケーブル(5m) ※帳票出力したい場合は、ハンディターミナル1台につきジャーナルプリンター1台が必要となります。

### 導入要件

- ・本製品は処方内容と取り揃えた薬品のGS1データバーとの照合のみに特化した製品です。
- ・処方データを取り込むため、レセプトコンピュータとNSIPSで連動する必要があります。
- ・本製品は構成機器の性能上、大量処理には適していません。高性能・大量処理が必要な場合には、ピッキングサポートシステム NEW PORIMS および Hp-PORIMS・GX Handy のご購入をおすすめします。



ジャーナルプリンター



製造元 **湯山製薬所** 株式会社 **ユヤマ** 株式会社

大阪本社 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号  
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)  
東京本社 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号  
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)

カタログの掲載内容は2023年1月現在のものです。  
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!  
「開局でお手伝いできること」  
「無菌製剤室を作ろう!」



14900003

(株)ユヤマ



JQA-QM5424  
(株)湯山製薬所