

ベーシックを追求した、  
簡単操作のスライドロックタイプ



小型包装品用高圧蒸気滅菌器

YS-A-C008

135°C  
3分滅菌

丸カスト  
18×2  
cm 個

精製水  
に  
対応

# シンプルなモード選択で使いやすい、高圧蒸気滅菌器。

## 135℃ 3分のスピーディーな滅菌。

C008は、ベーシックを追求したシンプルなつくりながら、滅菌性能はしっかりと担保。  
金属類なら135℃で3分、布類なら121℃の20分でスピーディーに滅菌できますので、効率よく作業いただけます。

## 精製水も使用できます。

使用する水は、水道水・精製水・蒸留水をご使用いただけます。



イラストキーでわかりやすく。乾燥あり/なしもかんたん選択。

135℃  
滅菌+乾燥



## 耐震マットもご用意。

OPTION

ユヤマクレーブは最新かつ細心の耐震対策を施しています。


ユヤマクレーブでは、最下部に耐震専用金具を取り付け、耐震マットをオプションでご用意。



### 仕様

製品名	小型包装品用高圧蒸気滅菌器
型式	YS-A-C008
外形寸法	幅467×奥行469×高さ366mm(ただし、ドアハンドルを除く)
チャンパー寸法	直径246×奥行360mm(入り口直径191mm)
内容量	16.5リットル 18cm丸カスト×2個
本体質量	26kg
電源・電圧	AC100V±10V 50/60Hz
消費電力	1,200W
乾燥方式	乾燥時は手動によるドア開け+ヒーター加熱(シーズヒーターのみ)
滅菌温度(滅菌時間)	135℃(3~60分) / 121℃(20~60分) ただし、3~60分まで1分単位で設定可能。
乾燥時間	標準設定 30分 ただし、0~95分まで5分単位で設定可能。
圧力計	0~0.4MPa
安全弁吹出圧力	0.239MPa
タンク貯水量	4リットル
安全装置	圧力安全弁、ドアインターロック、過熱防止バイメタル、空焚き防止バイメタル、漏電ブレーカー、電流ヒューズ
給水方法	給水タンクからの自動給水、または、計量カップによる手動給水
使用する水	水道水・精製水・蒸留水
付属品	トレー台、トレー、トレー取っ手、水受け皿、計量カップ
オプション	架台(ボックス・パイプ)、地震対策オプション
別売品	バスケット、丸カスト(小)、角カスト(小・中)
電撃保護の形式	クラスI
表示	満水・冷却・滅菌・乾燥
工程表示	ドア・給水・加熱・滅菌・乾燥・完了
医療機器クラス分類	クラスII(特定保守管理医療機器)
E M C 適合	JIS C 1806-1:2010に適合
薬事認証番号	228AHBZX00037000

### 外形寸法

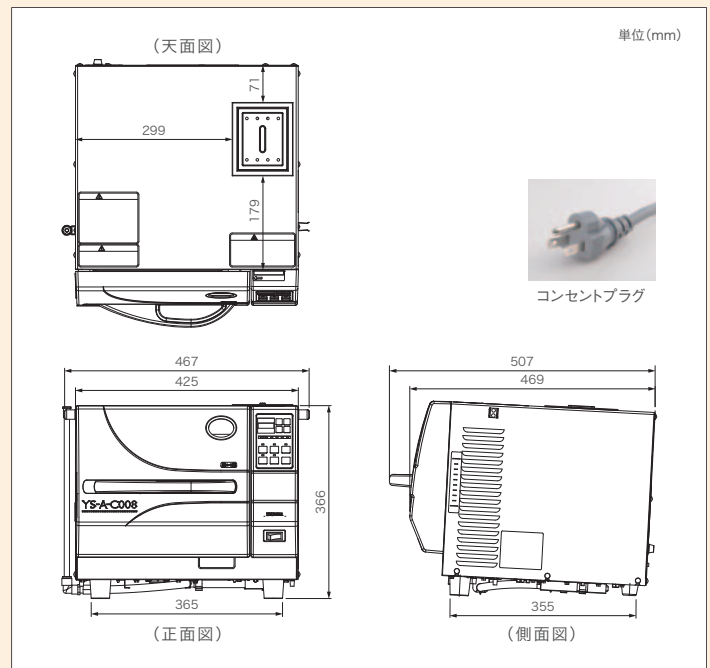

製造販売者 湯山製作所 販売業者 ユヤマ株式会社

大阪本社 | 〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号  
TEL.(06)6868-5155(代) FAX.(06)6868-5154(代)  
東京本社 | 〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号  
TEL.(03)3829-9511(代) FAX.(03)5611-2011(代)  
[医療機器製造販売業許可番号]27B2X00001 [医療機器製造業許可番号]27B2200564本社工場

カタログの掲載内容は2021年8月現在のものです。  
製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。

ユヤマのホームページはこちら!!



世界各国のユーザー様の活用事例はこちら!!



無償プレゼント実施中!  
「開局でお手伝いできること」  
「無菌製剤室を作ろう!」



(株)湯山製作所