

# YUNICOM-DSx

保険薬局向け調剤支援システム

医療のIT化と使い易さを志向した  
次世代ファーマシーのスタンダードシステム。

薬局に必要な機能を絞り込み、  
操作性と高機能をあわせ持ちました。

薬袋プリントシステム

調剤鑑査システム

水剤分注装置

全自動PTPシート払出装置

全自動錠剤分包機

散薬調剤ロボット

全自動散薬分包機


LAN

よりグラフィカルな画面設計で、  
ユーザーインターフェイスを高めました。



見易く十分なマスタ画面が支えます。

薬品マスタ

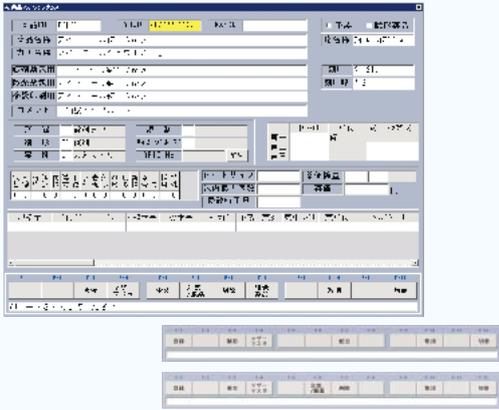


印刷名称を、錠剤薬包・散薬薬包・薬袋の用途別に登録することや、薬品毎に薬袋サイズを設定することが可能です。また、ファンクションボタンのパターンも切り替えられます。

患者マスタ



患者毎の内規設定やコメント設定したり、錠剤や散薬の印字フォーマットを選択することができます。

医療機関マスタ

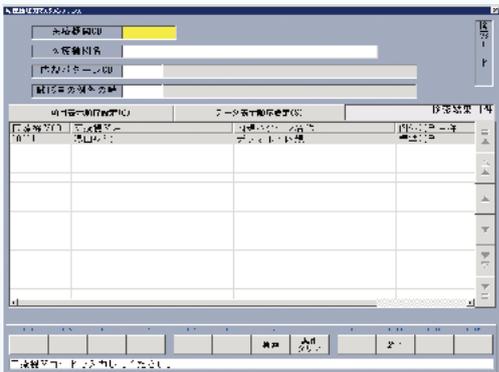


医療機関(処方発行元)毎に、要求される調剤内規を設定することが出来ます。

診療科マスタ



診療科目毎に科目名称の薬袋印字有無を選択できるうえ、診療科目毎の調剤内規を反映可能なマスタ項目です。

薬袋サイズマスタ

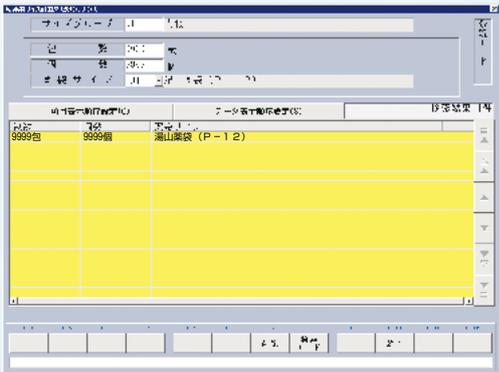

薬袋サイズグループ設定や、包数、個数という要素で薬袋サイズを選択することが出来ます。

内規マスタ




複数の内規マスタを持たせて、内規毎に詳細な内容を設定することが出来ます。

## YUNICOM-DSxハードスペック

Express5800/GT110g-s(2C/G3240-W2012R2Foundation)

- OS : Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation
- CPU : Pentium G3240(3.1GHz、2コア/2スレッド) × 1個
- メモリ : 4GB(標準なし、増設4GB × 1個)
- HDD : 500GB(SATA 7,200rpm) × 1

必要十分なシステム構成をご提供します。

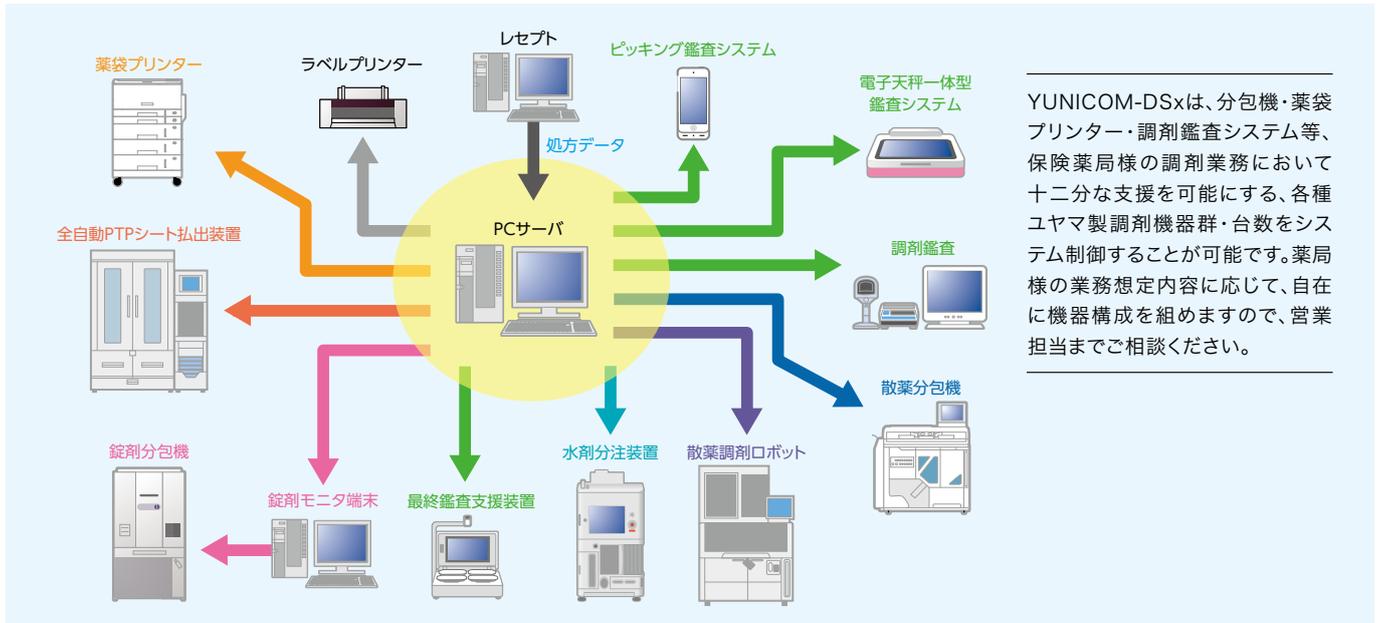

YUNICOM-DSxは、分包機・薬袋プリンター・調剤鑑査システム等、保険薬局様の調剤業務において十二分な支援を可能にする、各種ユヤマ製調剤機器群・台数をシステム制御することが可能です。薬局様の業務想定内容に応じて、自在に機器構成を組めますので、営業担当までご相談ください。

薬局を支援する豊富なシステムメニュー。

日常業務	マスタメンテナンス		更新業務	帳票出力	環境設定	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●入力鑑査                             <ul style="list-style-type: none"> <li>処方入力</li> <li>処方鑑査</li> </ul> </li> <li>●中央処理</li> <li>●受信変換</li> <li>●ゲートウェイ</li> <li>●モニタ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>錠剤モニタ</li> <li>薬袋モニタ</li> <li>薬袋編集</li> <li>Onedyモニタ</li> <li>Onedy2モニタ</li> <li>指示箋モニタ</li> <li>指示簿モニタ</li> <li>お薬手帳モニタ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●薬品情報                             <ul style="list-style-type: none"> <li>薬品マスタ</li> <li>実装薬品マスタ</li> <li>単位マスタ</li> <li>賦形マスタ</li> <li>倍散マスタ</li> <li>予製マスタ</li> <li>希釈マスタ</li> <li>薬品情報マスタ</li> <li>薬品説明マスタ</li> </ul> </li> <li>●患者情報                             <ul style="list-style-type: none"> <li>患者マスタ</li> <li>平均体重マスタ</li> </ul> </li> <li>●医療機関情報                             <ul style="list-style-type: none"> <li>医療機関マスタ</li> <li>診療科マスタ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●薬袋設定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>薬袋サイズマスタ</li> <li>薬袋号機マスタ</li> <li>薬袋サイズ計算マスタ</li> </ul> </li> <li>●フォーマット情報                             <ul style="list-style-type: none"> <li>錠剤フォーマット                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>●印字フォーマット</li> <li>●検薬フォーマット</li> </ul> </li> <li>印字区分フォーマットマスタ</li> <li>薬品情報印字フォーマット</li> <li>指示箋フォーマット</li> <li>指示簿ラベルフォーマット</li> <li>お薬手帳フォーマット</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●内規情報                             <ul style="list-style-type: none"> <li>内規マスタ</li> <li>取り纏めマスタ</li> <li>内規パターンマスタ</li> </ul> </li> <li>●その他                             <ul style="list-style-type: none"> <li>処方箋区分マスタ</li> <li>用法マスタ</li> <li>用法名称マスタ</li> <li>コメントマスタ</li> <li>調剤者マスタ</li> <li>医師マスタ</li> <li>汎用変換マスタ</li> <li>名称マスタ</li> <li>画像マスタ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●錠剤充填業務</li> <li>●削除業務                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Do削除</li> <li>錠剤充填記録削除</li> <li>削除処方分析削除</li> <li>錠剤薬品使用量削除</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●錠剤充填記録出力</li> <li>●薬品情報一覧出力</li> <li>●処方分析                             <ul style="list-style-type: none"> <li>処方分析</li> <li>時間毎処方分析</li> <li>削除処方分析</li> </ul> </li> <li>●錠剤薬品使用量出力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メッセージマスタ</li> <li>●DTAマスタ</li> <li>●形態マスタ</li> <li>●刑形マスタ</li> <li>●薬種マスタ</li> <li>●賦形マスタ</li> <li>●説明文変更履歴</li> <li>●棚番号マスタ</li> <li>●バージョン情報</li> </ul>

搭載マスタは、保険薬局様における要不要を十二分に吟味した上で取捨選択された内容となっております。例えば、複数の医療機関(処方発行元)を登録することが可能です。また、病院でしか必要の無いマスタは持たず、操作性を損なうことなくお使い頂ける構成をとっています。



開発元 **湯山製薬所** 株式会社

発売元



本社 大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 〒561-0841 阪TEL(06)6332-2556(代) FAX(06)6333-1971番

Medical Paradise! のアドレス [www.yuyama.co.jp/](http://www.yuyama.co.jp/) アクセスをお待ちしています。

カタログの掲載内容は2015年10月現在のものです。製品の改良のため仕様・デザインを予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ご購入に関するお問い合わせ・ご相談・お申し込みは下記へご一報ください。



(株)ユヤマは、2008年8月「保健医療福祉分野のプライバシーマーク」認定事業者となりました。「保健医療福祉分野のプライバシーマーク」は、一般事業者では取り扱わない特定の機微な個人情報を中心として取り扱う保健・医療・福祉分野に関連する事業者が対象とされ、一般事業者のプライバシーマークとは特に区別されています。



(株)湯山製薬所は、2003年3月にISO9001(2000年版)を取得し、2010年10月にはISO9001(2008年版)を取得しました。品質保証のプロセス管理に加えて、顧客満足向上の追求を含めた認証です。

**Home Page**  
<http://www.yuyama.co.jp>  
**無償プレゼント実施中!**  
**「開局でお手伝いできること」**  
**「無菌製剤室を作るう!」**